

ABRIS 测试

Pass/ Refer

简介： Pass/Refer 测试用于新生儿的客观听力评估。该测试检查脑干对特定强度（30, 35或40dB nHL）短声刺激的反应。

ABRIS 在达到 pass 的判断标准后会停止记录。否则会持续地记录到 120 秒，并报告为 refer。


适用范围： 筛查

电极放置： 传统的 4


电极记录方法： 颅顶电极、左右乳突电极和接地电极（脸颊、额下部）。也可用 3

电极： 颅顶电极、颈部电极和接地电极（脸颊、额下部）。

结果：

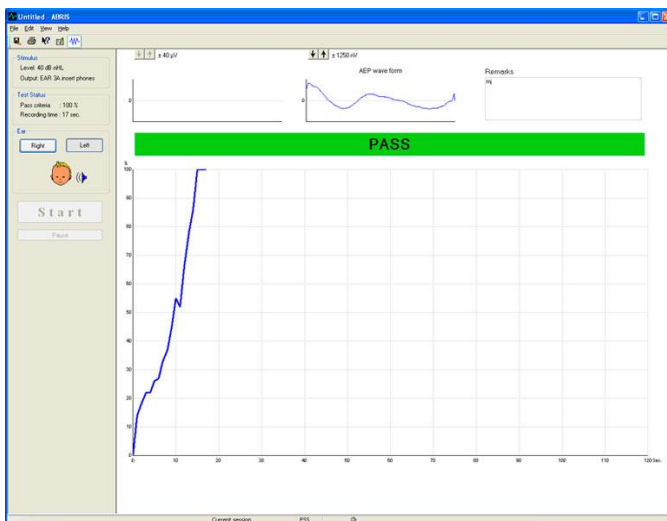

Pass 测试——40dB nHL（可選用30,35,40 dB nHL）

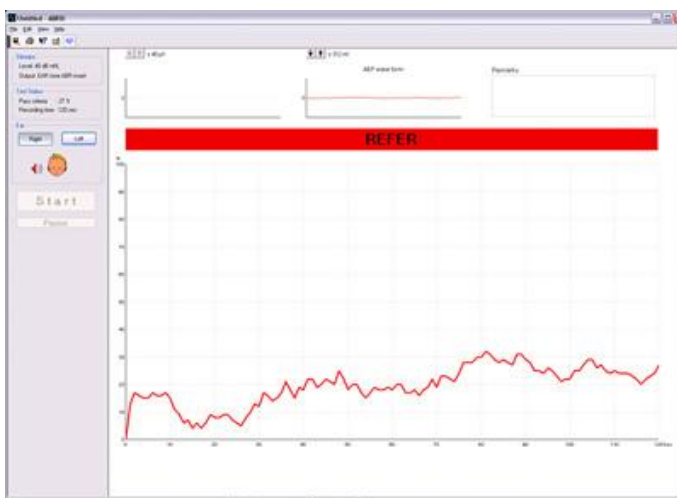

Refer 测试——40dB nHL（可選用30,35,40 dB nHL）